


Dentemp **Repair-It** Denture Repair Kit

Scan this code to learn more and
watch our instructional video:

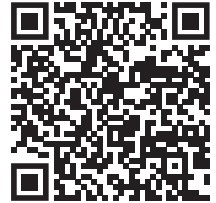

Intended Use: Repair-It is intended to be used as a single use, short-term, emergency remedy only, used for less than 30 days. The user should see a dentist as soon as possible to replace the denture.

READ DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USING. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do Not Use for loose caps or lost fillings. Do Not Use to reline a denture. WARNING: Denture repair liquid is flammable. Keep away from heat, open flames or sparks. **WARNING:** Avoid getting denture repair liquid on skin. If you do, wash area with water immediately. **WARNING:** Contains methacrylates. Do not use if you are allergic or sensitive to methacrylates. **Caution:** Do not put repaired denture back into your mouth until the denture repair material has hardened. **Caution:** Fit pieces together properly. Once this product hardens it can not be removed.

Hint: If, while mixing, the material hardens too fast for the mixture to become smooth and creamy then please try again but first put the liquid into a freezer for 1/2 hour to slow hardening.

1. Clean and dry pieces of the denture or tooth. Make sure there are no missing pieces and that everything fits properly back together. If you cannot do this, the denture will not fit when repaired. Do not proceed. See your dentist immediately.
2. Mix denture repair liquid and powder as follows:
 - Place contents of one Repair-It Powder packet into one of the enclosed mixing cups.
 - Hold a Repair-It Liquid packet in one hand and gently tear off the notched end so as not to spill any of the liquid. Hold the open end of the packet directly over the powder and add all of the liquid to the powder in the mixing cup. Be careful not to get any Repair-It Liquid onto your skin. This liquid is flammable. Do not use near sparks or an open flame. Use in a well ventilated area.
 - Using the spatula, mix until the mixture becomes smooth with a creamy consistency, like syrup.
3. Using the spatula, apply a small amount of the denture repair mixture to each broken edge of the denture or in the missing tooth area. Make sure that each broken edge has a thin coating of the denture repair mixture.
4. Immediately fit the broken pieces of the denture together, or press the tooth into position. Make absolutely sure that all pieces fit together properly and are in correct alignment.
- 5a. For Cracked or Broken Dentures: Press the pieces together and hold in place for five (5) minutes. Be sure that the pieces stay in perfect alignment. Skip to Step 8.
- 5b. For a Loose or Broken Tooth: Press the tooth in position and hold for one (1) minute. Be sure that the pieces stay in perfect alignment. Move on to Step 6.
6. Gently remove excess material carefully using a wet cotton tipped applicator.
7. Allow to set for an additional four (4) minutes while holding the pieces in place.
8. Using the clean end of the spatula, carefully scrape away any extra material that has squeezed out.
9. Soak repaired denture in hot tap water (not boiling) for 10 minutes.
10. Remove denture from water. Dry carefully.
11. If necessary, use high grit sandpaper to lightly smooth out any rough spots.
12. Wash denture and spatula with soap and water. Wash hands thoroughly. Allow any remaining material to thoroughly dry, then dispose in household garbage.

NOTE: After repairs have been completed, if for any reason the denture is uncomfortable or does not fit, do not use it. See your dentist immediately.

IMPORTANT: Special training and tools are needed to repair dentures to fit properly. Home-repaired dentures may cause irritation to the gums and discomfort and tiredness while eating. Long-term use may lead to more troubles, even permanent changes in bones, teeth, and gums, which may make it impossible to wear dentures in the future. For these reasons, dentures repaired with this kit should be used only in an emergency until a dentist can be seen. Dentures that don't fit properly cause irritation and injury to the gums and faster bone loss, which is permanent. Dentures that don't fit properly cause gum changes that may require surgery for correction. Continuing irritation and injury may lead to tumors in the mouth. You must see your dentist as soon as possible.

WARNING: For emergency repairs only. Long-term use of home repaired dentures may cause faster bone loss, continuing irritation, sores and tumors. This kit is for emergency use only. See dentist without delay. A new denture may be required.

Dentemp **Repair-It** Denture Repair Kit

Uso previsto: Repair-It está destinado a ser utilizado como remedio de emergencia de un solo uso, a corto plazo y únicamente durante menos de 30 días. El usuario debe acudir a un dentista lo antes posible para reemplazar la dentadura postiza.

SÍRVASE LEER DETENIDAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No use este producto para capas flojas o empastes caídas. No utilice para volver a alinear una dentadura. ADVERTENCIA: El líquido de reparación de dentaduras es inflamable. Manténgalo alejado de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas. **ADVERTENCIA:** Evite que el líquido de reparación de dentaduras entre en contacto con la piel. Si tal cosa ocurriera, lave el área inmediatamente con agua. **ADVERTENCIA:** Contiene metacrilatos. No debe utilizarse si usted es alérgico o sensible a los metacrilatos. **Precaución:** No vuelva a colocar la dentadura reparada en la boca hasta que el material de reparación de la dentadura se haga endurecido. **Precaución:** encaja las piezas correctamente. Una vez que este producto se endurezca, no se puede eliminar.

Sugerencia: si, al mezclar, el material se endurece demasiado rápido para mezcla llegar a ser liso cremoso, entonces favor intente nuevamente, pero primero ponga el líquido en un congelador por media hora para disminuir el tiempo de endurecimiento.

1. Limpie y seque las piezas de la dentadura o el diente. Asegúrese de que no haya piezas que falten. Si no puede hacer esto, la dentadura no le servirá cuando reparada. No proceda. Consulte a su dentista inmediatamente.
2. Mezcle el líquido para reparar las dentaduras con el polvo a lo siguiente:
 - Coloque el contenido de un paquete de polvo de Repair-It en una de las tazas de mezcla incluidas.
 - Mantenga un paquete de líquido de Repair-It con una mano y rasque suavemente el extremo con muescas para que no se derrame el líquido. Mantenga el extremo abierto del paquete directamente sobre el polvo y agregue todo el líquido al polvo en la taza. Tenga cuidado de no dejar que ningún líquido de Repair-It le llegue a su piel. Este líquido es inflamable. No lo utilice cerca de chispas o llamas abierta. Use en un área bien ventilada.
 - Usando la espátula, mezcle hasta que la mezcla se vuelva lisa con una consistencia cremosa, como el jarabe.
3. Con la espátula, aplique una pequeña cantidad de la mezcla de reparación de la dentadura en cada borde roto de la dentadura o en el área del diente faltante. Asegúrese de que cada borde roto tenga una capa delgada de la mezcla de reparación de la dentadura.
4. Coloque inmediatamente las piezas rotas de las prótesis juntas o presione el diente en su posición. Asegúrese de que todas las piezas encajen correctamente y estén alineadas correctamente.
- 5a. Para dentaduras postizas agrietadas o rotas: Presione las piezas juntas y manténgalas en su lugar durante cinco (5) minutos. Asegúrese de que las piezas se mantengan en perfecta alineación. Salta al paso 8.
- 5b. Para dientes sueltos o rotos: Presione el diente en posición y manténgalo presionado durante un (1) minuto. Asegúrese de que las piezas se mantengan en perfecta alineación. Continúe con el paso 6.
6. Retire con cuidado el exceso de material con un aplicador de algodón húmedo.
7. Deje reposar durante cuatro (4) minutos adicionales mientras mantiene las piezas en su lugar.
8. Raspe cuidadosamente cualquier material extra que haya sido exprimido.
9. Remoje la dentadura reparada en agua caliente del grifo (no hirviendo) durante 10 minutos.
10. Retire la dentadura del agua. Seque con cuidado.
11. Si es necesario, use papel de lija de grano alto para suavizar ligeramente los puntos ásperos.
12. Lave la dentadura y la espátula con agua y jabón. Lavese bien las manos. Deje que el material restante se seque completamente y luego deséchelo en la basura doméstica.

NOTA: Después de que se hayan completado las reparaciones, si por alguna razón la dentadura no es cómoda o no encaja, no la use. Consulte a su dentista inmediatamente.

IMPORTANTE: Se necesitan capacitación y herramientas especiales para reparar las dentaduras postizas para que se ajusten correctamente. Las dentaduras reparadas en el hogar pueden causar irritación de las encías y molestias y cansancio al comer. El uso prolongado puede ocasionar más problemas, incluso cambios permanentes en los huesos, dientes y encías, lo que puede hacer que sea imposible usar dentaduras en el futuro. Por estas razones, las dentaduras reparadas con este kit deben usarse solo en una emergencia hasta que se pueda ver a un dentista. Las dentaduras que no encajan correctamente causan irritación y lesiones en las encías y una pérdida ósea más rápida, que es permanente. Las dentaduras que no encajan adecuadamente causan cambios en las encías que pueden requerir cirugía para su corrección. La irritación y las lesiones continuas pueden provocar tumores en la boca. Debes ver a tu dentista lo antes posible.

ADVERTENCIA: Sólo para reparaciones de emergencia. El uso prolongado de dentaduras reparadas en el hogar puede causar una pérdida ósea más rápida, irritación continua, llagas y tumores. Este kit es solo para uso de emergencia. Consulte al dentista sin demora. Una nueva dentadura puede ser requerida.