

3M™ APC™ Flash-Free



APC™ Flash-Free
Adhesive Coated Appliance System




Tehnologii dovedite 3M. Performanță superioară.

Susținut de știința 3M, adezivul APC Flash-Free conține o multitudine de proprietăți avansate, specifice Tehnologiei 3M precum: nanotehnologie, adezivi și materiale cu o structură compactă. Toate acestea sunt utilizate pentru a crea design-ul inovativ APC Flash-Free.


Substrat de adeziv pentru lipire

Cu adezivul APC Flash-Free există o abatere minimă de la poziția inițială a bracket-ului. Acest lucru este datorat materialului. O pânză din microfibre de polipropilenă ce asigură grosimea și înălțimea necesare pentru o lipire sigură.

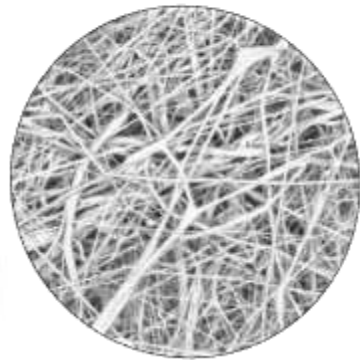

Rezistența adezivului

APC Flash-Free are o putere de prindere și o rezistență similară cu 3M™ Transbond™ XT Adhesive.

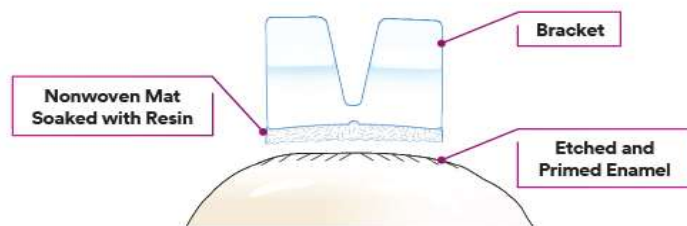

Protecție netedă și uniformă

Atunci când este comprimat pe dinte, substanța iese și formează un strat protector în jurul marginilor. Acesta minimizează golurile dintre marginile adezivului și suprafața dintelui.



APC™ Flash-Free Adhesive
Smooth, consistent
adhesive base



Traditional Adhesive
Rough, inconsistent adhesive
base from flash-removal step



Blistere sigilate individual


Soluțiile ortodontice 3M oferă o varietate de tehnologii cu sigiliu individual pentru a preveni riscul de contaminare încrucișată și pentru a asigura pacienții că protecția lor este esențială. Cu ajutorul blisterelor cu sigiliu, este ușor să inspire încredere.

3M™ Victory Series™ Low Profile Bracket System



Adaptare naturală.

Design-ul romboidal și raza plată, permit așezarea naturală pe suprafețele diferite ale dinților. Astfel, asigură un contact în trei puncte pentru o adaptare sporită.

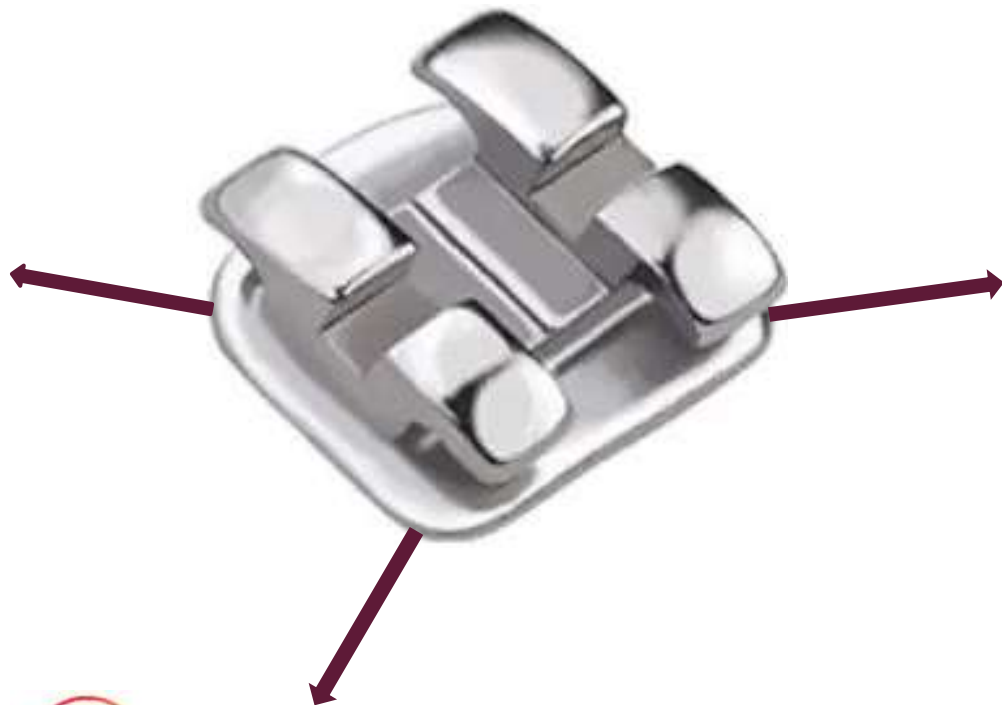

Simplitate versatilă.

Zona amplă de legatură este parte integrantă a designului, astfel încât nu trebuie să sacrificați dimensiunea suportului pentru o ligare ușoară.



Rezultat consistent.

Oferind niveluri de control fără compromisuri pe tot parcursul procesului de tratament, acest sistem de bracketi asigură rezultate consecvente ale pacientului. Obțineți aceste rezultate mai eficient atunci când sistemul de brackets este pre-acoperit cu adeziv APC Flash-Free.

3M™ Clarity™ Advanced Ceramic Brackets



Mic dar rezistent.

Creat din material ceramic cu granulație fină, bracketii Clarity Advanced oferă o rezistență de încredere într-o dimensiune mică.



Confort sporit al pacientului.

Bracketii mici oferă o suprafață netedă și colțuri rotunjite pentru a spori confortul pacientului fără a sacrifica estetica.



Desprindere practică.

Punctul nostru unic de stres, permite debonding-ul mezial-distal cu o simplă strângere, astfel încât să puteți desprinde cu rapiditate, ușurință și încredere.

